

Meet your new MITO LIGHT®

DUAL STAND

USER MANUAL / NÁVOD K POUŽITÍ / BEDIENUNGSANLEITUNG

BG, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, DE, EL, HU, IT, LV, LT, NO, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, UK

Děkujeme!

Vážená zákaznice/vážený zákazník, děkujeme za projevenou důvěru při nákupu MITO LIGHT®.

Naše značka je první, která přinesla unikátní červená a blízká infračervená LED světla na český trh, a jsme rádi, že u toho jste s námi.

MITO LIGHT® jsme vytvořili s vášní sdílet s vámi účinky červeného a blízkého infračerveného světla.

Záruka vysoké kvality našich výrobků je pro nás klíčová a pevně věříme, že vás okouzlí stejně jako nás a ostatní uživatele.

Před použitím MITO LIGHT® Dual Stand si pečlivě přečtěte tento návod, uschovejte jej pro pozdější použití, poskytněte jej i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Váš tým MITO LIGHT®

Obsah

01

Obsah balení

02

Základní montáž

03

Vertikální instalace

04

Horizontální instalace

05

Vysvětlení symbolů

06

Bezpečnostní pokyny


07

Technické údaje

08

Záruka a reklamace

Obsah balení

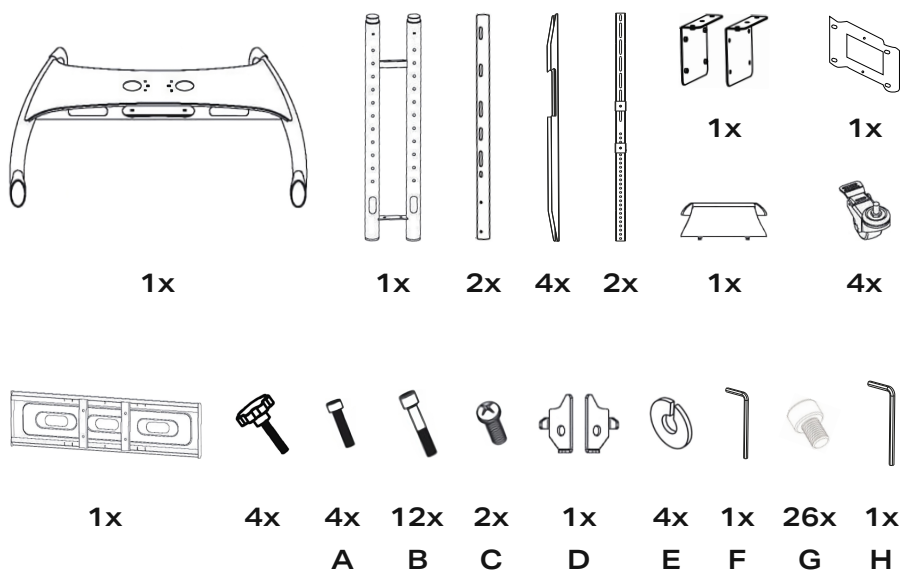

Nejprve zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní a zda není poškozený. V případě pochybností zařízení nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce.

Obaly jsou recyklovatelné nebo se mohou odevzdat pro cirkulaci surovin.


Zlikvidujte, prosím, již nepotřebný obalový materiál v souladu s předpisy. Pokud při vybalení zjistíte škody vzniklé přepravou, kontaktujte ihned svého prodejce.

Specifikace stojanu, množství nebo umístění jednotlivých dílů anebo obsah tohoto návodu k použití se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení funkcí výrobku.


Základní montáž

Montáž koleček na podstavu stojanu

1. Otočte podstavu vzhůru nohama (obrázek 1).
2. Zabrzděte kolečka.
3. Mezi závit a kolečka vložte 4x podložku E.
4. Našroubujte kolečka do podstavu.
5. Otočte podstavu zpět do výchozí pozice (obrázek 2).

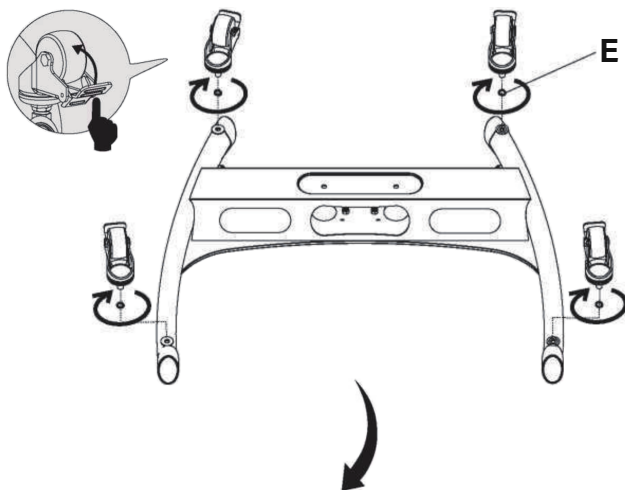

Obrázek 1


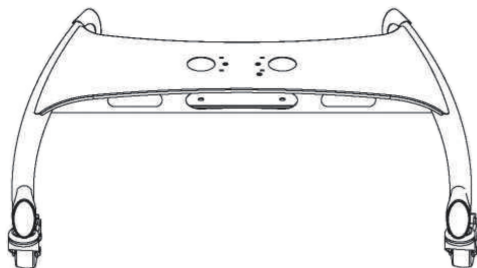


Obrázek 2


Montáž základových tyčí do podstavy stojanu

1. Umístěte základové tyče do podstavy stojanu tak, jak je uvedeno na obrázku 3.
2. Zašroubujte 2x šrouby A z vrchní strany podstavy.
3. Zašroubujte 2x šrouby A ze spodní strany podstavy.
4. Zacvakněte plastovou krytku mezi základové tyče.

Obrázek 4

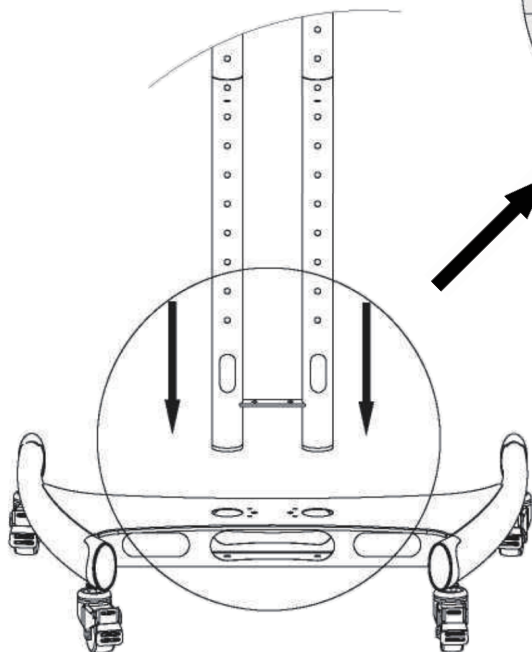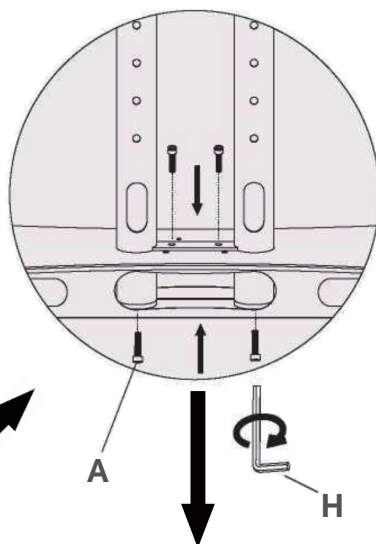


Obrázek 3

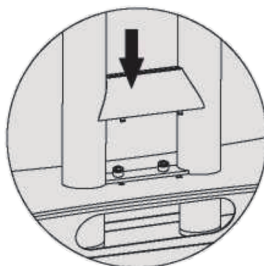


Obrázek 5

Nastavení výšky teleskopických tyčí

1. Vyšroubujte bezpečnostní šroub ve spodní části teleskopické tyče.
2. Zmáčkněte pružinový píst, otočte teleskopickou tyč mírně do strany a vytáhněte tyč do požadované výšky. Poté otočte teleskopickou tyč zpět, aby se pružinový píst zacvakl do díry.
3. Zajistěte teleskopickou tyč – zašroubujte bezpečnostní šroub zpět do závitu nad pružinovým pístem.
4. Opakujte s druhou teleskopickou tyčí.

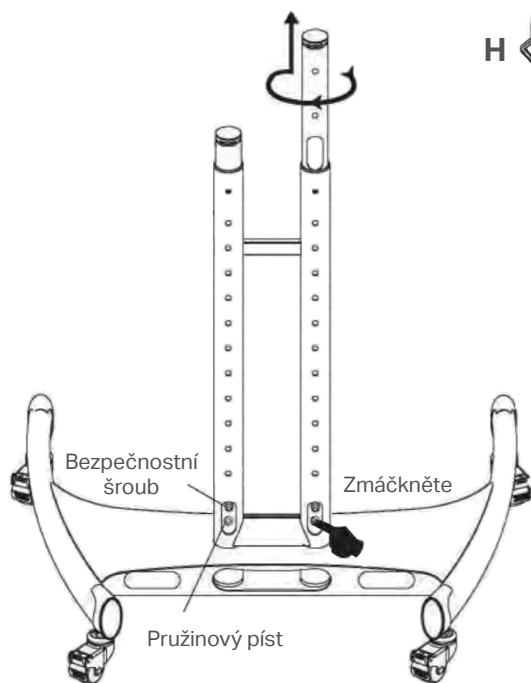

Obrázek 6


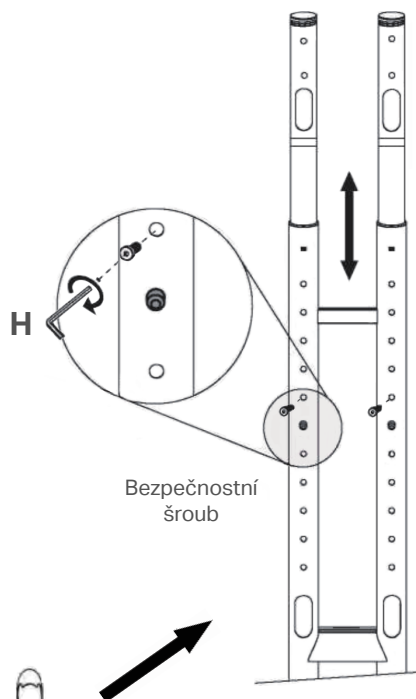


Obrázek 7

Vertikální instalace

Montáž vertikální závěsné desky na teleskopické tyče

1. Umístěte vertikální závěsnou desku na přední stranu teleskopických tyčí.
2. Umístěte stabilizační desku na zadní stranu teleskopických tyčí.
3. Zašroubujte 4x šrouby B. Začněte vrchním šroubem na jedné straně a pokračujte spodním na straně druhé. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny 4 šrouby na svých pozicích.
4. Jakmile jsou všechny šrouby na svých pozicích, utáhněte je.

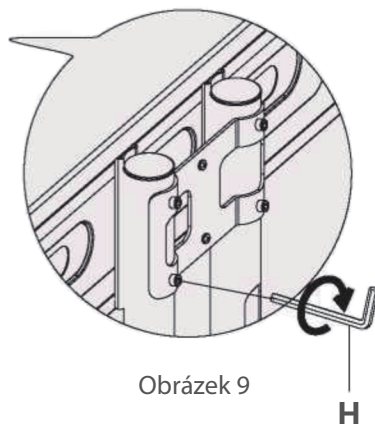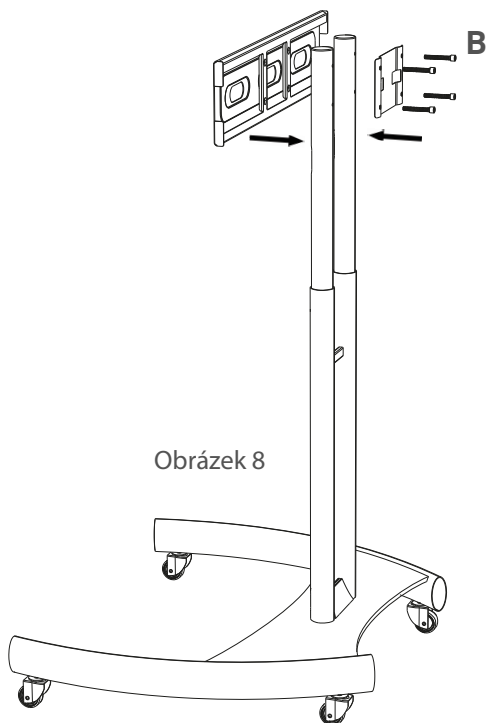

Montáž vertikálních držáků na LED panel

1. Přišroubujte 2x vertikální držáky na LED panel. Použijte co nejvíce šroubů G v závislosti na dostupných závitech. Umístěte první šroub podle vašeho modelu:

Expert 3.0 - První závit shora na panelu, osmá díra na vertikálním držáku. (Nutno odšroubovat gumové nožičky a zlaté kovové háčky.)

Expert 4.0 - První závit shora na panelu, osmá díra na vertikálním držáku. (Nutno odšroubovat gumové nožičky.)


Biohacker 3.0 - První závit shora na panelu, první díra na vertikálním držáku. (Nutno odšroubovat zlaté kovové háčky.)

Biohacker 4.0 - První závit shora na panelu, osmá díra na vertikálním držáku.


Mitohacker 3.0 - První závit shora na panelu, první díra na vertikálním držáku.

Mitohacker 4.0 - První závit shora na panelu, šestá díra na vertikálním držáku.

2. Pokud instalujete dva LED panely, umístěte vertikální držáky tak, aby jejich střed byl uprostřed těchto dvou panelů, jako je znázorněno na obrázku 10.

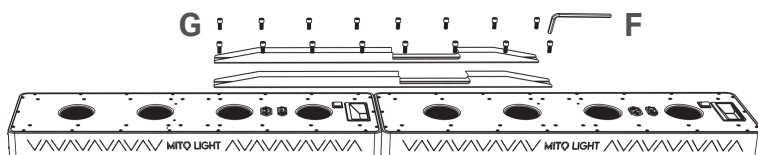


Obrázek 10

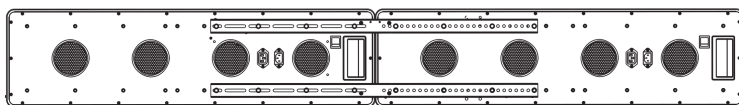


Zavěšení LED panelu na vertikální závěsnou desku

1. Zavěste LED panel na vertikální závěsnou desku pod mírným úhlem tak, jak je znázorněno na obrázku 11.
2. Srovnejte panel do roviny a zajistěte na obou stranách kovovým zámkem. Přišroubujte kovový zámek 2x šrouby C, jak je znázorněno na obrázku 12.

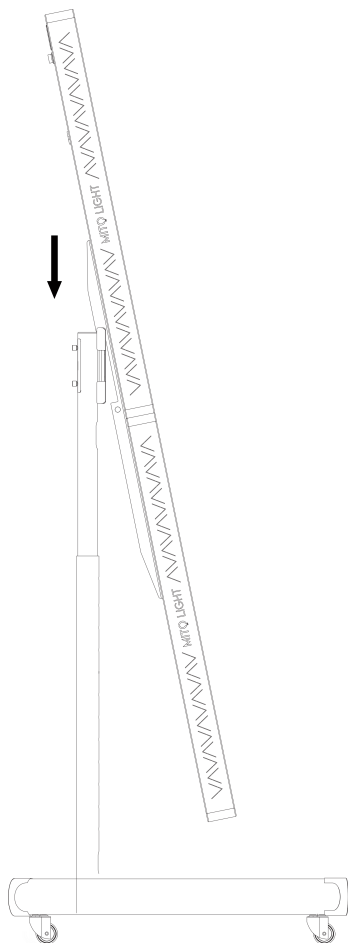

Obrázek 11

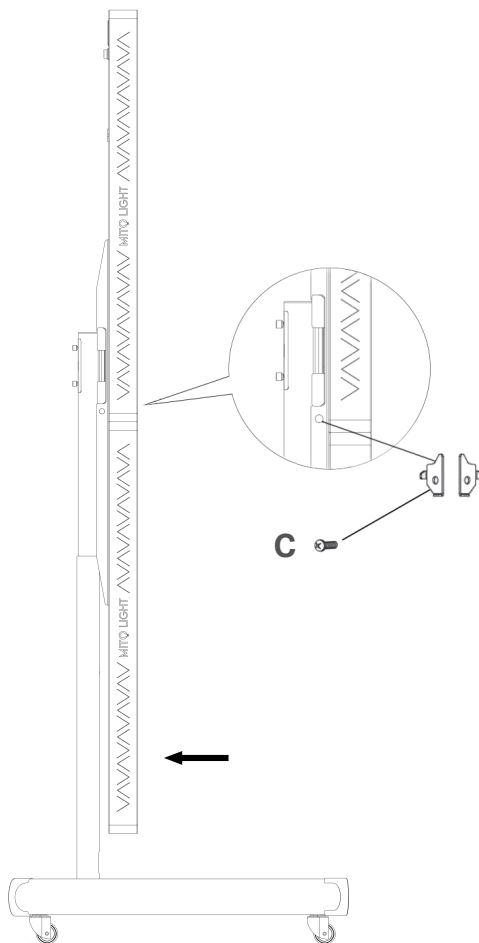


Obrázek 12


Horizontální instalace

Montáž horizontálních závěsných desek na teleskopické tyče

1. Podstava a teleskopické tyče jsou postaveny na základě postupu z části "Základní montáž".
2. Umístěte horizontální závěsnou desku se závití na přední stranu teleskopických tyčí, umístěte horizontální závěsnou desku bez závitů na zadní stranu teleskopických tyčí a zašroubujte 4x šrouby B, jak je znázorněno na obrázku 13.
3. Umístěte horizontální závěsné tyče na vrchní stranu desek a přišroubujte 4x šrouby B jak je znázorněno na obrázku 14.

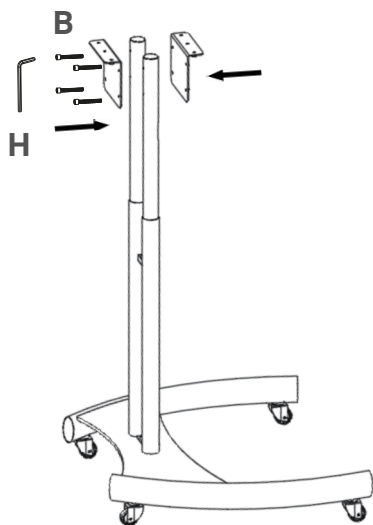

Obrázek 13

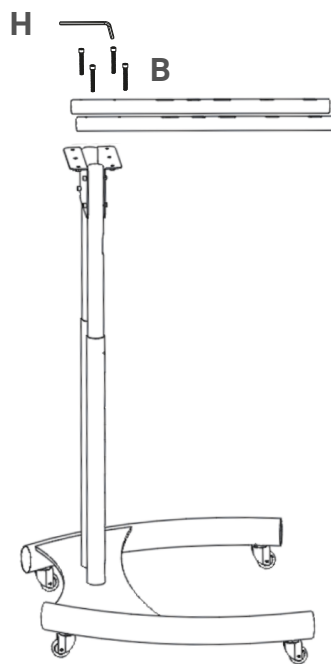

Obrázek 14

Montáž horizontálních držáků na LED panel


1. Přišroubujte 2x horizontální držáky na LED panel. Použijte co nejvíce šroubů G podle dostupných závitů. Vodorovný držák umístěte tak, aby byl uprostřed zařízení. Vezměte prosím na vědomí:

Expert 3.0 - Gumové nožičky a zlaté kovové háčky musí být odšroubovány.


Expert 4.0 - Gumové nožičky musí být odšroubovány.

Biohacker 3.0 - Zlaté kovové háčky musí být odšroubovány.

2. Pokud instalujete dva LED panely, umístěte horizontální držáky tak, aby byly uprostřed zařízení, jak je znázorněno na obrázku 16. V případě potřeby odšroubujte gumové nožičky a zlaté kovové háčky.

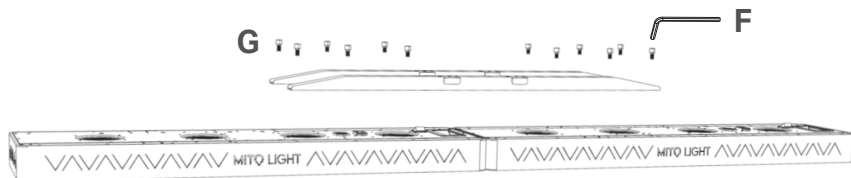


Obrázek 15

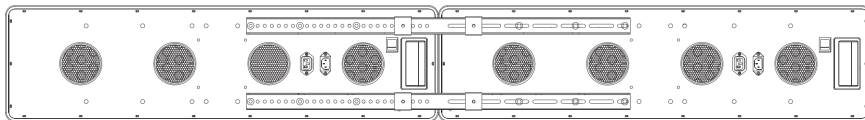


Obrázek 16

Zavěšení LED panelu na horizontální tyče

1. Připevněte LED panel k vodorovným tyčím na stojanu pomocí 4x šroubů s plastovou hlavou, jak je znázorněno na obrázku 17 (potřeba 2 osob).

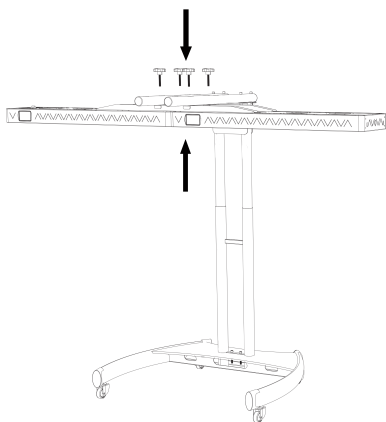

Obrázek 17

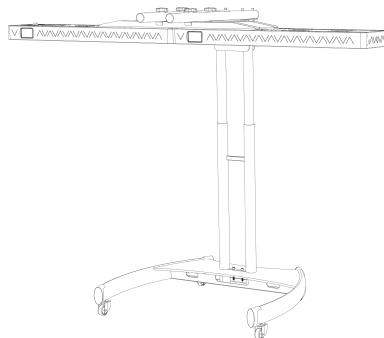

Obrázek 18

Vysvětlení symbolů

V návodu k použití jsou použity následující symboly:

Varování 

Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.

Pozor 

Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství.

Bezpečnostní pokyny

INSTALACE



- Stojan nainstalujte podle tohoto návodu k použití a zajistěte zařízení na stojanu, abyste zabránili pádu.
- Umístěte stojan na pevný a rovný povrch.
- Stojan není stabilní, pokud stojí bez zabrzděných koleček. Před montáží jakéhokoli zařízení se ujistěte, že je stojan řádně zajištěn a že jsou kolečka zabrzděna.
- Ujistěte se, že podlahový materiál, na kterém je stojan umístěn, má dostatečnou přilnavost, aby nedošlo k nechtěnému pohybu i se zabrzděnými kolečky.
- Stojan používejte pouze v souladu s jeho určením, jak je uvedeno v tomto návodu k použití.
- Nepoužívejte stojan na volném prostranství.
- Nesprávná instalace může způsobit převrácení nebo pád stojanu nebo namontovaného zařízení, což může vést k vážnému zranění nebo poškození.
- Při instalaci stojanu a montáži zařízení dbajte na to, aby byly všechny šrouby a kování řádně dotaženy. Pravidelně kontrolujte bezpečnost těchto spojů.
- Před montáží jakéhokoli zařízení se vždy ujistěte, že je stojan bezpečně nainstalován. Pokud si nejste jisti instalací, obraťte se na svého prodejce nebo na uvedený zákaznický servis.
- Nepokoušejte se na stojan namontovat zařízení, které překračuje jeho maximální hmotnostní limit.
- Pravidelně kontrolujte instalaci stojanu, abyste zajistili jeho bezpečnost v průběhu času. Pokud se zdá, že některá část slábne nebo se zhoršuje, okamžitě přestaňte stojan používat a kontaktujte svého prodejce nebo uvedený zákaznický servis.
- Neumísťujte stojan na místa s vysokým pohybem, kde by mohlo dojít k jeho převržení.
- Stojan uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k náhodnému pádu nebo poškození.
- Výrobce neodpovídá za škody nebo zranění způsobené použitím neschváleného příslušenství, zařízení nebo nesprávnou instalací.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU



- Před použitím stojanu odstraňte všechny obaly.
- Zkontrolujte, zda stojan nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Máte-li pochybnosti o stavu stojanu, nepoužívejte jej a obraťte se na svého prodejce nebo uvedený zákaznický servis.
- Chraňte stojan před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Zvažte možné cesty a překážky na podlaze, jako jsou kabely, koberce nebo nerovný povrch, abyste zajistili bezpečné přemístění stojanu bez zachycení.

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÝM ÚČELEM



- Stojan je určen pouze k montáži zařízení uvedených v tomto návodu k použití.
- Jakékoli jiné použití se považuje za použití v rozporu s instrukcemi.
- Tento stojan není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o jeho používání osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení – malé části.
- Stojan nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, topných těles nebo jiných zdrojů vysoké teploty, protože by to mohlo časem narušit konstrukční integritu stojanu.
- U stojanu neměřte nic bez souhlasu výrobce.
- Výrobce neručí za škody způsobené neodborným nebo nesprávným používáním.

ČISTĚNÍ A OPRAVA



- Stojan nesmíte opravovat sami. V opačném případě není zaručena jeho bezchybná funkce. Při nedodržení těchto zásad zaniká záruka.
- Při opravách se obraťte na svého prodejce nebo uvedený zákaznický servis.
- Před prováděním jakéhokoli čištění se ujistěte, že je stojan ve stabilní poloze a že jsou kolečka zabrzděna.
- Pravidelně čistěte kolečka hadříkem a odstraňujte z nich veškeré nečistoty, které by mohly ovlivnit jejich funkčnost.
- Při čištění stojan jemně otřete hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

ULOŽENÍ A PŘEPRAVA



- Stojan skladujte na suchém místě.
- Stojan nepoužívejte ani neskladujte na místech, kde by byl vystaven působení toxických výparů nebo těkavých látek.
- Před přemístěním stojanu se ujistěte, že je cesta volná, a vyvarujte se prudkých pohybů nebo trhnutí, zejména s namontovaným zařízením.
- Při přepravě se ujistěte, že jsou všechna zařízení ze stojanu sejmuta a všechny části jsou zajištěny.
- Při skladování umístěte stojan do ochranného obalu, abyste zabránili hromadění prachu a případnému poškození.

V PŘÍPADĚ HAVÁRIE



• V případě jakéhokoli problému se nepokoušejte stojan sami opravovat nebo rozebírat. Mohlo by to vést k dalšímu poškození nebo zranění. Obratťe se na svého prodejce nebo na uvedený zákaznický servis, kde vám poradí.

UPOZORNĚNÍ

- Tento stojan není určen pro průmyslové nebo klinické použití.
- Při používání stojanu v různých zemích se vždy seznamte s místními předpisy a normami.
- Při zdravotních problémech jakéhokoliv druhu se obraťte na svého lékaře!

Technické údaje

Název a model: MITO LIGHT® Dual Stand

Rozměry (Š x D x V): 84,5 x 71,5 x 100-155 cm

Váha: 18,5 kg

Provozní podmínky: teplota v rozmezí 10°C až 30°C, vlhkost v rozmezí 40 % až 60 %

(nekondenzující), atmosférický tlak 980 hPa až 1050 hPa, nadmořská výška 0 – 2000 m n. m.

Skladovací podmínky: teplota v rozmezí 0°C až 40°C, vlhkost v rozmezí 40 % až 60 % (nekondenzující)

Materiály: kov, plast

Barva: černá

Podporovaná zařízení MITO LIGHT®: Expert 3.0, Biohacker 3.0, Mitohacker 3.0

Expert 4.0, Biohacker 4.0, Mitohacker 4.0

Maximální hmotnostní limit: 40 kg

Technické změny za účelem zlepšení a dalšího vývoje zařízení a případné chyby tisku si vyhražujeme.

Záruka a reklamace

Na stojan MITO LIGHT® Dual Stand poskytujeme **záruku 3 roky**.

Pokud vám zboží již přišlo nefunkční, nebo se objevil jakýkoli problém v průběhu používání, postupujte dle instrukcí na stránce: www.mitolight.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi

Vaši reklamaci vyřešíme v rekordním čase!

Reklamační řád naleznete na stránce: www.mitolight.cz/reklamacni-rad



CUSTOMER SERVICE

hello@mitolight.com

+420 735 333 997

MITO LIGHT Logistics s.r.o.

Co. Reg. No.: 19262680

Simerova 428/3

301 00 Pilsen

Czech Republic

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

info@mitolight.cz

+420 735 333 997

MITO LIGHT Logistics s.r.o.

IČO: 19262680

Šimerova 428/3

301 00 Plzeň

Česká republika

KUNDENBETREUUNG

hello@mitolight.com

+420 735 333 997

MITO LIGHT Logistics s.r.o.

UID: 19262680

Simerova 428/3

301 00 Pilsen

Tschechische Republik