

Meet your new MITO LIGHT®

HORIZONTAL STAND

USER MANUAL / NÁVOD K POUŽITÍ / BEDIENUNGSANLEITUNG

BG, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, DE, EL, HU, IT, LV, LT, NO, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, UK

Děkujeme!

Vážená zákaznice/vážený zákazník, děkujeme za projevenou důvěru při nákupu MITO LIGHT®.

Naše značka je první, která přinesla unikátní červená a blízká infračervená LED světla na český trh, a jsme rádi, že u toho jste s námi.

MITO LIGHT® jsme vytvořili s vášní sdílet s vámi účinky červeného a blízkého infračerveného světla.

Záruka vysoké kvality našich výrobků je pro nás klíčová a pevně věříme, že vás okouzlí stejně jako nás a ostatní uživatele.

Před použitím MITO LIGHT® Horizontal Stand si pečlivě přečtěte tento návod, uschovejte jej pro pozdější použití, poskytněte jej i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Váš tým MITO LIGHT®

Obsah

01

Obsah balení

02

Základní montáž

03

Horizontální instalace

04

Vertikální instalace

05

Vysvětlení symbolů

06

Bezpečnostní pokyny


07

Technické údaje

08

Záruka a reklamace

Obsah balení

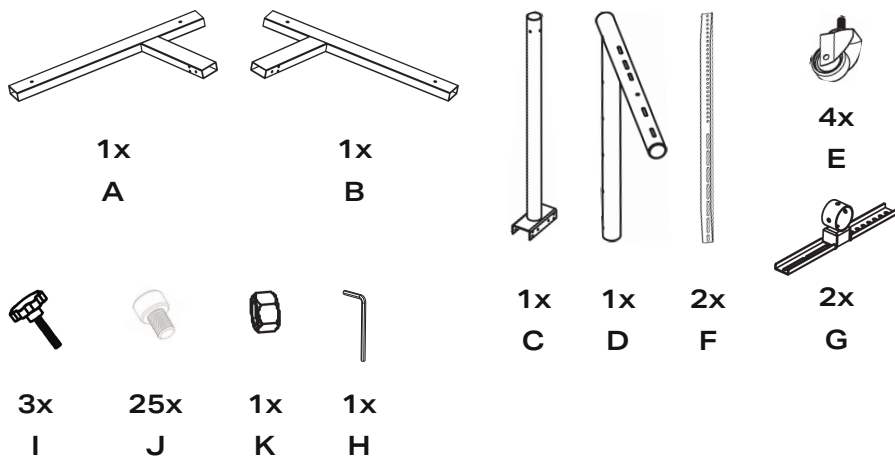

Nejprve zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní a zda není poškozený.
V případě pochybností zařízení nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce.


Obaly jsou recyklovatelné nebo se mohou odevzdat pro cirkulaci surovin.

Zlikvidujte, prosím, již nepotřebný obalový materiál v souladu s předpisy.
Pokud při vybalení zjistíte škody vzniklé přepravou, kontaktujte ihned svého prodejce.


Specifikace stojanu, množství nebo umístění jednotlivých dílů anebo obsah tohoto návodu k použití se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení funkce výrobku.

Základní montáž

Krok 1

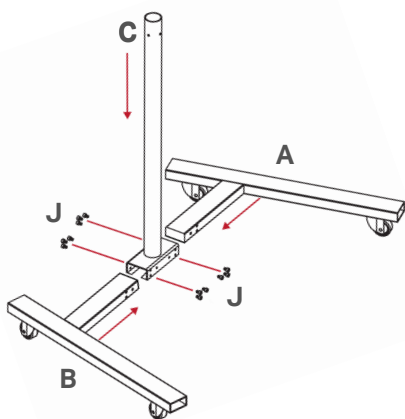

Krok 2

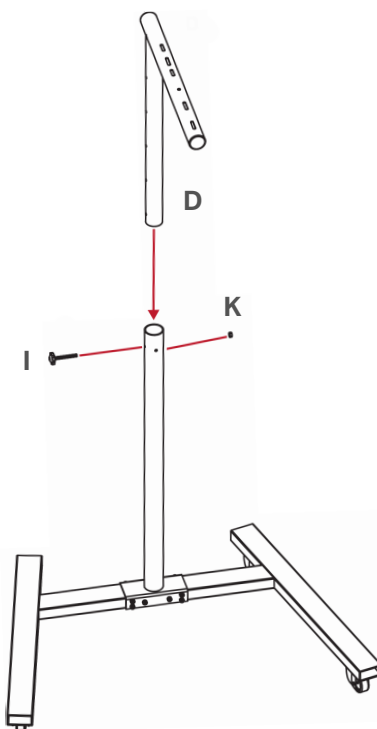

Krok 3


Ujistěte se, že jsou všechny šrouby zcela utaženy.

Krok 4

Zablokujte brzdy na kolečkách.


Horizontální instalace 1 zařízení

Krok 1

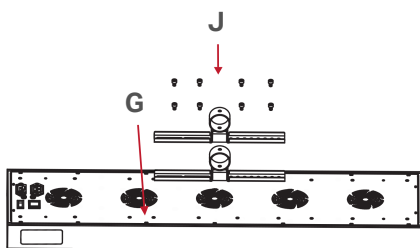


Krok 2

Ujistěte se, že jsou všechny šrouby zcela utaženy.

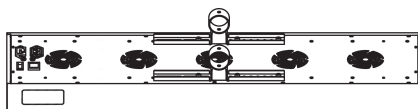


Krok 3

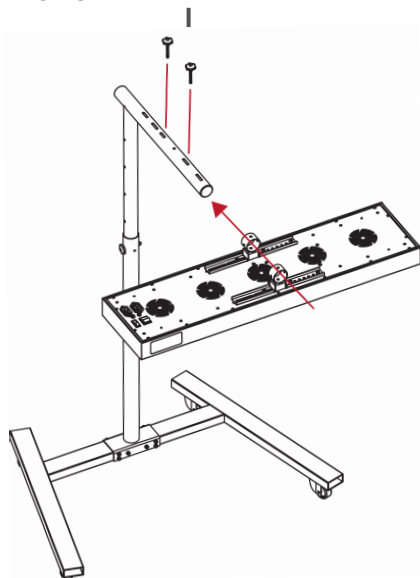


Krok 4

Ujistěte se, že jsou všechny šrouby zcela utaženy.

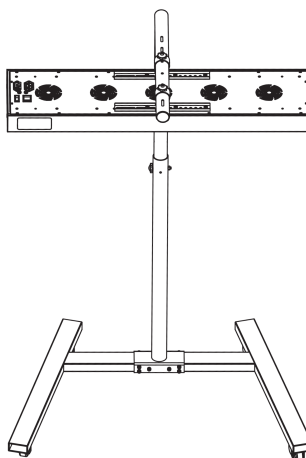


Horizontální instalace 2 zařízení

Krok 1

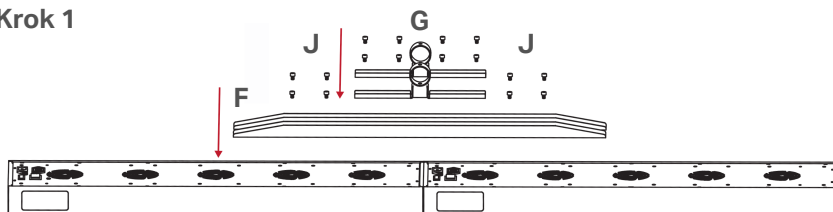


Krok 2

Ujistěte se, že jsou všechny šrouby zcela utaženy.

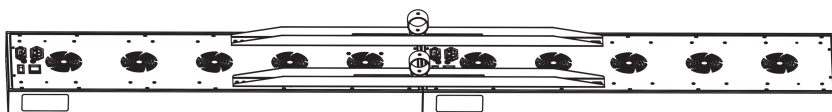


Krok 3

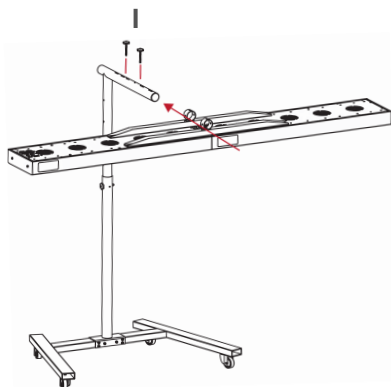


Krok 4

Ujistěte se, že jsou všechny šrouby zcela utaženy.

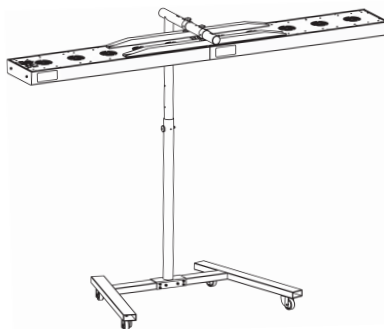


Vertikální instalace


Krok 1

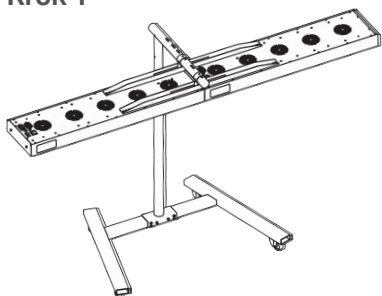

Krok 2

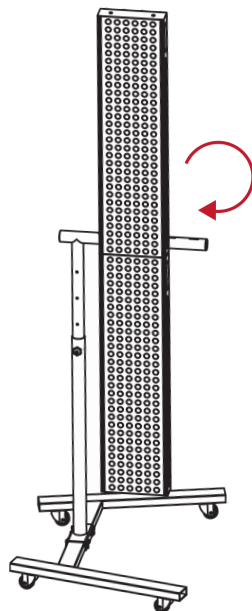

Krok 3

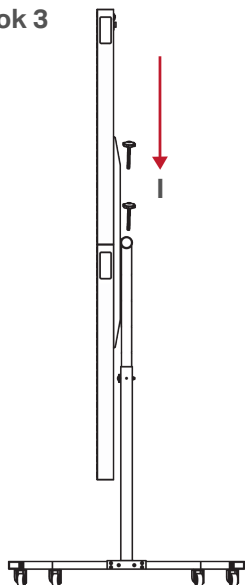

Krok 4

Ujistěte se, že jsou všechny šrouby zcela utaženy.

Vysvětlení symbolů

V návodu k použití jsou použity následující symboly:

Varování 

Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.

Pozor 

Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství.

Bezpečnostní pokyny

INSTALACE



- Stojan nainstalujte podle tohoto návodu k použití a zajistěte zařízení na stojanu, abyste zabránili pádu.
- Umístěte stojan na pevný a rovný povrch.
- Stojan není stabilní, pokud stojí bez zabrzděných koleček. Před montáží jakéhokoli zařízení se ujistěte, že je stojan řádně zajištěn a že jsou kolečka zabrzděna.
- Ujistěte se, že podlahový materiál, na kterém je stojan umístěn, má dostatečnou přilnavost, aby nedošlo k nechtěnému pohybu i se zabrzděnými kolečky.
- Stojan používejte pouze v souladu s jeho určením, jak je uvedeno v tomto návodu k použití.
- Nepoužívejte stojan na volném prostranství.
- Nesprávná instalace může způsobit převrácení nebo pád stojanu nebo namontovaného zařízení, což může vést k vážnému zranění nebo poškození.
- Při instalaci stojanu a montáži zařízení dbejte na to, aby byly všechny šrouby a kování řádně dotaženy. Pravidelně kontrolujte bezpečnost těchto spojů.
- Před montáží jakéhokoli zařízení se vždy ujistěte, že je stojan bezpečně nainstalován. Pokud si nejste jisti instalací, obraťte se na svého prodejce nebo na uvedený zákaznický servis.
- Nepokoušejte se na stojan namontovat zařízení, které překračuje jeho maximální hmotnostní limit.
- Pravidelně kontrolujte instalaci stojanu, abyste zajistili jeho bezpečnost v průběhu času. Pokud se zdá, že některá část slábne nebo se zhoršuje, okamžitě přestaňte stojan používat a kontaktujte svého prodejce nebo uvedený zákaznický servis.
- Neumísťujte stojan na místa s vysokým pohybem, kde by mohlo dojít k jeho převržení.
- Stojan uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k náhodnému pádu nebo poškození.
- Výrobce neodpovídá za škody nebo zranění způsobené použitím neschváleného příslušenství, zařízení nebo nesprávnou instalací.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU



- Před použitím stojanu odstraňte všechny obaly.
- Zkontrolujte, zda stojan nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Máte-li pochybnosti o stavu stojanu, nepoužívejte jej a obraťte se na svého prodejce nebo uvedený zákaznický servis.
- Chraňte stojan před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Zvažte možné cesty a překážky na podlaze, jako jsou kabely, koberce nebo nerovný povrch, abyste zajistili bezpečné přemístění stojanu bez zachycení.

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÝM ÚČELEM



- Stojan je určen pouze k montáži zařízení uvedených v tomto návodu k použití.
- Jakékoli jiné použití se považuje za použití v rozporu s instrukcemi.
- Tento stojan není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o jeho používání osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení – malé části.
- Stojan nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, topných těles nebo jiných zdrojů vysoké teploty, protože by to mohlo časem narušit konstrukční integritu stojanu.
- U stojanu nemějte nic bez souhlasu výrobce.
- Výrobce neručí za škody způsobené neodborným nebo nesprávným používáním.

ČIŠTĚNÍ A OPRAVA



- Stojan nesmíte opravovat sami. V opačném případě není zaručena jeho bezchybná funkce. Při nedodržení těchto zásad zaniká záruka.
- Při opravách se obraťte na svého prodejce nebo uvedený zákaznický servis.
- Před prováděním jakéhokoli čištění se ujistěte, že je stojan ve stabilní poloze a že jsou kolečka zabrzděna.
- Pravidelně čistěte kolečka hadříkem a odstraňujte z nich veškeré nečistoty, které by mohly ovlivnit jejich funkčnost.
- Při čištění stojan jemně otřete hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

ULOŽENÍ A PŘEPRAVA



- Stojan skladujte na suchém místě.
- Stojan nepoužívejte ani neskladujte na místech, kde by byl vystaven působení toxických výparů nebo těkavých látek.
- Před přemístěním stojanu se ujistěte, že je cesta volná, a vyvarujte se prudkých pohybů nebo trhnutí, zejména s namontovaným zařízením.
- Při přepravě se ujistěte, že jsou všechna zařízení ze stojanu sejmuta a všechny části jsou zajištěny.
- Při skladování umístěte stojan do ochranného obalu, abyste zabránili hromadění prachu a případnému poškození.

V PŘÍPADĚ HAVÁRIE



- V případě jakéhokoli problému se nepokoušejte stojan sami opravovat nebo rozebírat. Mohlo by to vést k dalšímu poškození nebo zranění. Obraťte se na svého prodejce nebo na uvedený zákaznický servis, kde vám poradí.

UPOZORNĚNÍ

- Tento stojan není určen pro průmyslové nebo klinické použití.
- Při používání stojanu v různých zemích se vždy seznamte s místními předpisy a normami.
- Při zdravotních problémech jakéhokoli druhu se obraťte na svého lékaře!

Technické údaje

Název a model: MITO LIGHT® Horizontal Stand

Rozměry (Š x D x V): 91 x 64,5 x 95-135 cm

Váha: 15,3 kg

Provozní podmínky: teplota v rozmezí 10°C až 30°C, vlhkost v rozmezí 40 % až 60 % (nekondenzující), atmosférický tlak 980 hPa až 1050 hPa, nadmořská výška 0 – 2000 m n. m.

Skladovací podmínky: teplota v rozmezí 0°C až 40°C, vlhkost v rozmezí 40 % až 60 % (nekondenzující)

Materiály: kov, plast

Barva: černá

Podporovaná zařízení MITO LIGHT®: Expert 3.0, Biohacker 3.0, Mitohacker 3.0

Expert 4.0, Biohacker 4.0, Mitohacker 4.0

Maximální hmotnostní limit: 20 kg

Technické změny za účelem zlepšení a dalšího vývoje zařízení a případné chyby tisku si vyhrazujeme.

Záruka a reklamace

Na stojan MITO LIGHT® Horizontal Stand poskytujeme **záruku 3 roky**.

Pokud vám zboží již přišlo nefunkční, nebo se objevil jakýkoli problém v průběhu používání, postupujte dle instrukcí na stránce: www.mitolight.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi

Vaši reklamaci vyřešíme v rekordním čase!

Reklamační řád naleznete na stránce: www.mitolight.cz/reklamacni-rad



CUSTOMER SERVICE

hello@mitolight.com

+420 735 333 997

MITO LIGHT Logistics s.r.o.

Co. Reg. No.: 19262680

Simerova 428/3

301 00 Pilsen

Czech Republic

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

info@mitolight.cz

+420 735 333 997

MITO LIGHT Logistics s.r.o.

IČO: 19262680

Šimerova 428/3

301 00 Plzeň

Česká republika

KUNDENBETREUUNG

hello@mitolight.com

+420 735 333 997

MITO LIGHT Logistics s.r.o.

UID: 19262680

Simerova 428/3

301 00 Pilsen

Tschechische Republik